



Il supporto intelligente per pipette

Controllate lo stato della taratura

Visualizzate i dati di manutenzione

Gestite la conformità

Ricco di funzioni, facile da usare
Semplice gestione delle pipette

Semplice gestione delle pipette


SmartStand si adatta al flusso di lavoro

SmartStand Rainin è un sistema di gestione delle pipette intelligente e semplice da usare che consente ai responsabili di laboratorio di:

- **Ridurre i costi dovuti ai risultati fuori specifica/fuori servizio**
- **Gestire la conformità proattivamente**
- **Risparmiare tempo con la tracciabilità e la creazione di report**

Leggendo il chip RFID di ogni pipetta Rainin XLS e XLS+, SmartStand visualizza in tempo reale le condizioni delle pipette, fino ad un massimo di quattro pipette manuali o elettroniche. Scegliete un pipetta e lo schermo LCD a colori di SmartStand vi mostrerà una visualizzazione dettagliata della manutenzione e dello stato di taratura.

SmartStand funziona in modo indipendente o si integra con il software di gestione delle pipette EasyDirect™ per creare un sistema di tracciabilità nell'intero laboratorio. EasyDirect semplifica la gestione delle risorse consentendo di registrare l'utilizzo delle pipette, di segnalare le pipette che richiedono manutenzione, di trasferire i dati tra altri sistemi di gestione di laboratorio (LIMS) e di registrare dati univoci (come il proprietario, i metodi di controllo rapido e il numero di inventario) sul chip RFID di ciascuna pipetta.

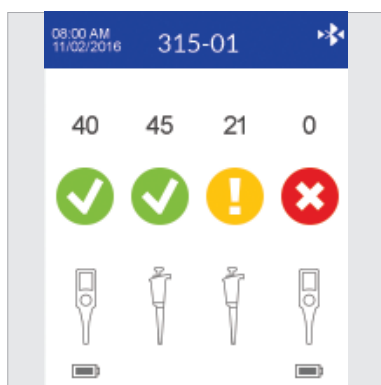

Riducete i costi

Saprete sempre quando le vostre pipette richiedono un intervento di taratura o di manutenzione. SmartStand offre chiarezza e trasparenza direttamente sul banco di lavoro.

Gestite la conformità

Migliorate la tracciabilità grazie ad un sistema automatico e altamente personalizzabile per gestire in modo proattivo manutenzione, taratura e controllo periodico delle prestazioni delle pipette.

Risparmiate tempo

SmartStand semplifica e migliora la gestione delle pipette. Mostra i dati di manutenzione archiviati su ciascuna pipetta Rainin XLS e li integra con EasyDirect per creare un sistema di tracciabilità e reportistica completo.



SmartStand: tutto in un'unica soluzione

SmartStand si trasforma in un "Gancio intelligente" con un kit accessorio di fissaggio.

I lettori RFID sono in grado di scansionare fino a quattro pipette alla volta

Lo schermo di facile lettura mostra lo stato della pipetta

Ricarica fino a quattro pipette E4 contemporaneamente

La testa rimovibile si può montare su parete o mensola

Bluetooth e porta mini-USB integrati



SmartStand e EasyDirect™

Potenti strumenti di gestione delle risorse

SmartStand

- Flessibile, scalabile
- Per pipette manuali ed elettroniche XLS e XLS+
- Intervalli di manutenzione/taratura definiti dall'utente
- Promemoria QuickCheck per la verifica periodica delle prestazioni
- Interfaccia grafica intuitiva
- 110/220 V, 50-60 Hz
- Si collega tramite Bluetooth* o USB
- Montaggio su mensola o parete autonomo o con kit opzionali

Gestione delle pipette con EasyDirect

- Si collega a diversi SmartStand o ad un PC
- Monitora e gestisce tutti i marchi/modelli di pipette
- Legge/scrive sui chip RFID delle pipette Rainin XLS e XLS+
- È possibile esportare in Excel, csv o xml (aggiunta, sovrascrittura o eliminazione)
- Pianificatore dell'esportazione automatica per funzionamento autonomo
- Programmazione delle richieste di assistenza
- Requisiti di sistema:
Windows 7 (SP1) o versione superiore, 5 GB di memoria libera e 4 GB di RAM

N. ordine	Descrizione
30312897	Supporto di carica intelligente SCS-B
30312898	Supporto di carica intelligente SCS
30312899	Kit di fissaggio magnetico SCS-FK-M
30313000	Kit di fissaggio con mensola SCS-FK-S
30313247	Kit di fissaggio con staffa SCS-FK-B
17012879	Alimentazione delle pipette elettriche E4-RCSWPS
30086494	Dongle RS232 bluetooth ADP-BT-S

* Per il modello SCS, utilizzare il dongle bluetooth ADP-BT-S (N. ordine 30086494)

www.mt.com/rainin

Per maggiori informazioni

Mettler-Toledo Rainin, LLC

7500 Edgewater Drive, Oakland, CA 94621
Tel. +1 510 564 1600
Fax +1 510 564 1604

Soggetto a modifiche tecniche

© 10/2016 Mettler-Toledo Rainin, LLC

Stampato su richiesta dai contenuti on-line. PB-269 Rev. A (A4)